


## Urina - Analisi chimiche: raccolta urina delle 24 ore senza conservanti

Contenitore senza conservante (50), provetta per urina spontanea senza conservante (52)

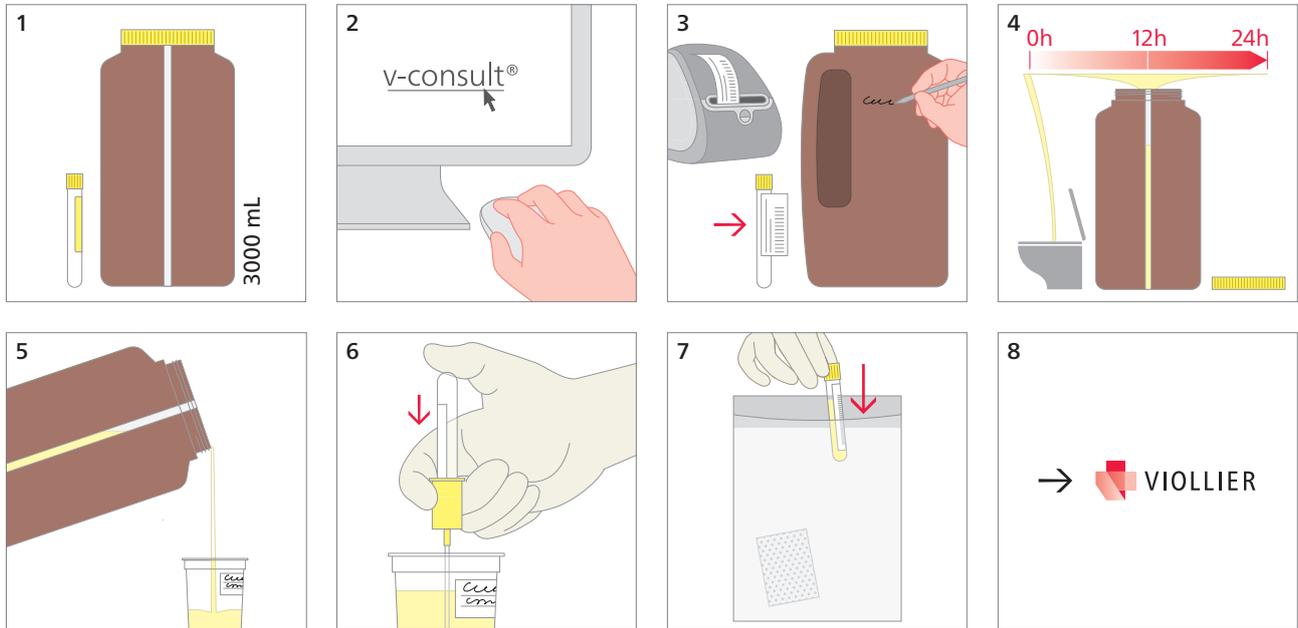

**4** Inizio del periodo di raccolta: gettare la prima urina del mattino, dopo di che vanno raccolte tutte le porzioni fino al mattino successivo, compresa la prima urina del mattino  
Conservare i contenitori di raccolta al fresco e al buio per tutto il periodo di raccolta  
Annotare il tempo e il volume di raccolta e trasmettere le informazioni al medico. Il medico registra i dati in v-consult®

**5** Mescolare l'urina e versarla nel contenitore

**6** Riempire completamente con l'urina almeno 1 provetta per urina spontanea → Quantità minima per l'analisi secondo v-consult®

→ Si prega di smaltire contenitori di raccolta e contenuto nello studio medico

Materiale di spedizione:

Indicare cognome, nome e data di nascita del paziente.